



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



叠加式-振荡培养箱-生物摇床

新产品

叠加式-振荡培养箱，集公司十多年设计和制造经验，引进消化国外技术，以用户的需求为导向，不断技术创新，广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等，可对微生物细胞与各类菌种动态、静态的培养。

产品特点

人性化设计

- 集培养箱、振荡器于一体，其可叠加的特点，具有占地面积小、使用率高；
- 运行安静，为您创造好的工作环境，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 采用彩色大触摸屏，多组数据一屏显示，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂；
- 大观察视窗，箱体内胆采用304不锈钢、振动台面采用铝材表面抑菌涂层处理，便于清洗；
- 上下开式箱门，振荡台面可抽出，方便用户取放物品；

品质保证

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转；
- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用一线品牌产品，免维护；

连续运行保证

- 低散热无刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷；

环境温度监测系统

- 独立的环境温度检测器，可根据实验中的环境温度的变化进行自动调节振荡培养箱加热系统，以避免箱内温度过冲情况发生；

三偏心轴平衡驱动

- 三偏心轴平衡驱动工艺，确保在振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设计保证了我们的振荡器甚至在满载，高速的状态下也能表现出强劲的实力；

安全功能

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊；
- 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏；
- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外；
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发；
- 标配USB数据转移接口（U盘）或选配RS-485接口（二选一），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警。同时可选嵌入式打印机（选配）

分级权限管理（选配）

- 具有多个可分配多个账户，可根据设备管理需要，将设备控制器操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限等级账户；

功能扩展（选配）

- 光照控制；（模拟自然生长环境）
- 湿度监测与控制；

安全冲水功能（选配）

- 箱体内部能够用水进行全方位冲洗，保证箱体内洁净环境；



HZQ-101(C)
HZQ-111(C)
HZQ-121(C)



HZQ-102(C)
HZQ-112(C)
HZQ-122(C)



HZQ-103(C)
HZQ-113(C)
HZQ-123(C)

技术参数

参数	型号	叠加式 - 振荡培养箱					
	HZQ -101 HZQ -102 HZQ -103	HZQ -111 HZQ -112 HZQ -113	HZQ -121 HZQ -122 HZQ -123	HZQ -101C HZQ -102C HZQ -103C	HZQ -111C HZQ -112C HZQ -113C	HZQ -121C HZQ -122C HZQ -123C	
控制器	彩色触摸屏控制器 (7 寸)						
工作室 (个)	1-3 (可叠加)						
振荡频率	40~300rpm						
振荡精度	±1						
振幅	26mm						
允许震荡承重 (单层)	15kg	20kg	30kg	15kg	20kg	30kg	
控温范围	RT+5~65℃			4~65℃			
温度分辨率	0.1℃						
温度均匀度	±0.3 (37℃ 时)						
加热方式	内置加热循环系统						
消毒方式	紫外线杀菌系统						
定时范围	0~99 小时 59 分						
内部高度 (mm)	350		325	350		325	
托盘尺寸单台 (mm)	500×460	760×460	980×560	500×460	760×460	980×560	
外形尺寸 W×H×D(mm)	1000×670×920 1000×1270×920 1000×1870×920	1200×670×920 1200×1270×920 1200×1870×920	1450×670×920 1450×1270×920 1450×1870×920	1000×670×920 1000×1270×920 1000×1870×920	1200×670×920 1200×1270×920 1200×1870×920	1450×670×920 1450×1270×920 1450×1870×920	
额定功率 (单台)	950W	1250W	1550W	950W	1250W	1550W	
电源	220V 50Hz						
价格	RMB36500 RMB76500 RMB119000	RMB41700 RMB87500 RMB133000	RMB55900 RMB114500 RMB175000	RMB40500 RMB83500 RMB128000	RMB46200 RMB94500 RMB142000	RMB61500 RMB125000 RMB188000	

注 1：三台叠加时，下面两层为下开门、最上面一层为上开门；

注 2：三层叠加，最上层最高转速为 250rpm；

注 3：以上数据均在环境温度 25℃，湿度 50%RH 环境下测得；

可选夹具配置表：（单台）

型号	10 型		11 型		12 型	
锥形烧瓶夹数量	250ml×27 只 1000ml×9 只	500ml×16 只 2000ml×5 只	250ml×41 只 1000ml×15 只	500ml×25 只 2000ml×8 只	250ml×67 只 1000ml×28 只	500ml×38 只 2000ml×15 只
粘垫 W×D（140mm×140mm）	9 只		15 只		24 只	
万能弹簧夹	450×450 1 只（最多）		350×350 2 只（最多） 400×340 2 只（最多） 450×450 1 只（最多）		350×350 2 只（最多） 400×340 2 只（最多） 450×450 2 只（最多）	
	注：选择小尺寸或少数量时，其他区域可选配锥形烧瓶夹或粘垫					
其他夹具	可根据订单特制各种夹具					

选购件:(增加选购件交货期14天)

- 1、RS485/232接口及通讯软件 ￥600元
- 2、无线报警系统（短信报警系统） ￥2500元
- 3、嵌入式打印机..... ￥2500元
- 4、分级权限功能..... ￥3000元

注1：RS485/232、打印机二选一


注2：提供3Q验证和校准服务（选配）




托盘



烧瓶夹

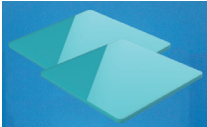

粘垫

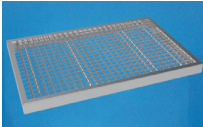

万能夹具

叠加式振荡培养箱

43

生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

恒温培养箱 09
隔水式恒温培养箱 12

生物安全培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
20

光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28

回旋振荡器 33
恒温振荡培养箱 35

恒温振荡器 37
大型恒温振荡器 38

落地振荡器 39
摇瓶机 40

叠加式-振荡培养箱 41
44

超低温冰箱 45
低温冷藏箱 47

液相液氮罐 48
干式运输液氮罐 50

生物安全柜 51
洁净工作台 52

干燥箱 54
真空干燥箱 60

加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验室 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外耐候气候试验箱 89
90

氙灯耐候气候试验箱 91
盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发仪 97
循环水真空泵 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混匀仪 110

多管漩涡混匀仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122

叠加式振荡培养箱

44