



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

TV-150BM粘度计—永不磨损，经久耐用

日本原装进口

東機産業

产品特点

无驱轴功能（扭丝+磁性轴承）

- 采用非接触式的“扭丝和磁性轴承”结构，零部件无损耗.高精度和安心的测定，持续稳定的数据重复性；

彩色液晶触摸面板

- 搭载了3.5英寸彩页液晶触摸面板，测定参数一目了然，操作简便直观；

一键式的转子安装

- 采用可拆卸转子的简易棒插式方式；

温度表示

- 使用专用的温度传感器（选配）可显示测定中的温度；

数据输出

- 可与打印机或PC连接；

粘度测定范围

机型	满量程扭矩	粘度测定范围
TV-150BM	67.37 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	15 ~ 6,000,000 mPa·s
TV-150BH	718.7 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	100 ~ 40,000,000 mPa·s
TV-150BR	1437.4 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	100 ~ 80,000,000 mPa·s
TV-150BU	5749.6 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	400 ~ 320,000,000 mPa·s


技术参数

规格	型号	TV-150BM 型
旋转速度、段数		0.1~100.0rpm(0.1rpm 步进)
精度		满刻度之 $\pm 1.0\%$ 以内
再现性		满刻度之 $\pm 0.2\%$ 以内
粘度表示		同时显示粘度值、% 转矩值、测定上限值 (SI 或 CGS 单位)
周围环境温度		0~40°C
周围环境湿度		相对湿度低于 90% (无结露)
接触液体部分的材料		不锈钢
电源		AC100~230V
消耗电流		20vA
主机尺寸 (W×D×H) mm		120×182×199
底座尺寸 (W×D×H) mm		300×310×436
重量		约 2.4kg

标准配置



TM型转子一套

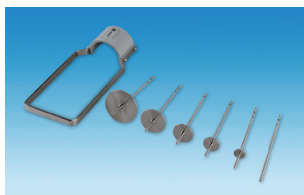


TH型转子一套



底座支架



收纳箱

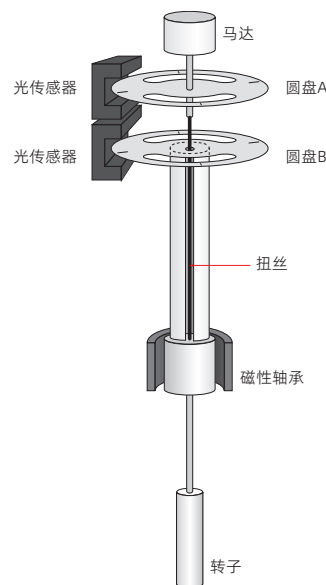

粘度计