

恒温水槽与水浴锅(两用) 新产品 专业型

新推出的BWS系列水槽/水浴锅两用槽，集公司多年在水槽与水浴锅领域研发与生产的成功经验，通过不断潜心研究，突破现有国产水槽与水浴锅没有缺水防烧功能的缺陷。BWS系列与一般水槽、水浴锅相比具有以下特点：集水槽与水浴锅为一体，一槽两用，一次冲压成型不锈钢内胆，并带有缺水防空烧功能和独立限温安全系统，保证安全运行不发生意外。可广泛使用与计量、生命科学、制药、医学、化工等领域。

产品特点

- 集水槽与水浴锅为一体，一槽两用；
- 一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作；
- 液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，带定时功能，简单易懂，便于观察和操作；（可选配多段程序控制器）
- 不锈钢网架搁板，可遮盖加热器和传感器等重要部件，避免使用中的碰坏；
- 烧杯孔大小可任意调节；
- 一次成型平板式不锈钢盖；
- 尖顶盖，可防止水分蒸发和水露进入试验样本造成污染；（选配）
- 透明塑料盖可选，可直观掌握样本状况；（选配）
- 可安放试管夹；（选配）
- 外壳为一体成型，ABS材料，耐酸碱腐蚀，外观新颖；
- 标配防干烧功能，5键控制，防干烧保护需要手动启停进行复位，避免自动重启带来的风险；
- 可选配独立限温保护，防止实验过程中的意外风险；

安全功能

- 具有缺水防空烧功能，出现缺水现象马上切断加热器，保证仪器安全运行；
- 独立限温报警系统，使样品得到可靠保护，不发生意外；
- 温度偏高和超温报警；



不锈钢网架隔板




BWS-0510

技术参数

技术指标	名称	恒温水槽与水浴锅(两用)				
		BWS-5	BWS-10	BWS-20	BWS-0505	BWS-0510
电源电压	型号	AC220V 50HZ				
消耗功率		400W	600W	1200W	1200W	1600W
控温范围		RT+5 ~ 99℃				
恒温波动度		±0.3℃				
跟踪报警		±2℃				
内胆尺寸 (mm) W×D×H		300×155×150	300×240×150	500×300×150	280×130×150	280×130×150 280×220×150
外形尺寸 (mm) W×D×H		345×210×280	345×295×280	550×360×280	450×395×260	526×395×260
定时范围		0 ~ 5999min				
备注		二孔	双列四孔	双列六孔	二孔 + 二孔	二孔 + 四孔
价格		RMB2390	RMB2890	RMB3590	RMB4090	RMB4790

注：每孔五圈规格尺寸：Φ32、Φ52、Φ72、Φ92、Φ112

多孔盖

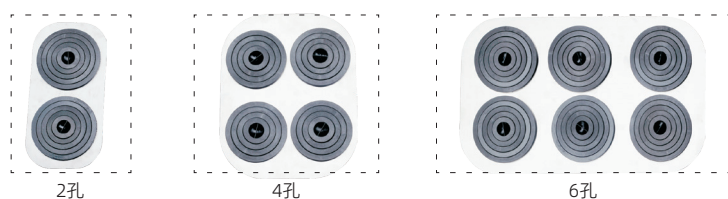

选配件:(增加选配件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器 ¥ 1500元
- 2、RS485接口和通讯软件 ¥ 600元
- 3、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 4、尖顶盖 ¥ 350元

注：RS485、打印机二选一

生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

生物安全培养箱 09
恒温培养箱 10

隔水式恒温培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
18

光照培养箱/人工气候箱 19
恒温恒湿箱 26

回旋振荡器 31
恒温培养摇床 33

恒温振荡器 35
大型恒温振荡器 36

落地振荡器 37
摇瓶机 38

叠加式-振荡培养箱 39
42

超低温冰箱 43
低温冷藏箱 45

液相液氮罐 46
干式运输液氮罐 48

生物安全柜 49
洁净工作台 50

干燥箱 52
真空干燥箱 59

加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验箱 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外耐候试验箱 89
90

氙灯耐候试验箱 91
盐雾腐蚀性试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发器 97
分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混合仪 110

多管漩涡混合仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122