

恒温水槽与水浴锅(两用) 新产品 专业型

新推出的BWS系列水槽/水浴锅两用槽，集公司多年在水槽与水浴锅领域研发与生产的成功经验，通过不断潜心研究，突破现有国产水槽与水浴锅没有缺水防烧功能的缺陷。BWS系列与一般水槽、水浴锅相比具有以下特点：集水槽与水浴锅为一体，一槽两用，一次冲压成型不锈钢内胆，并带有缺水防空烧功能和独立限温安全系统，保证安全运行不发生意外。可广泛使用与计量、生命科学、制药、医学、化工等领域。

产品特点

- 集水槽与水浴锅为一体，一槽两用。
- 一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作。
- 液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，带定时功能，简单易懂，便于观察和操作。（可选配多段程序控制器）
- 不锈钢网架搁板，可遮盖加热器和传感器等重要部件，避免使用中的碰坏。
- 烧杯孔大小可任意调节。
- 一次成型平板式不锈钢盖。
- 尖顶盖，可防止水分蒸发和水露进入试验样本造成污染。（选配）
- 可安放试管夹。（选配）

安全功能

- 具有缺水防空烧功能，出现缺水现象马上切断加热器，保证仪器安全运行。
- 独立限温报警系统，使样品得到可靠保护，不发生意外。
- 温度偏高和超温报警。



水槽、水浴一体



不锈钢网架隔板



BWS-5



BWS-0505



BWS-20




BWS-0510

技术参数

名称 型号	恒温水槽与水浴锅(两用)				
	BWS-5	BWS-10	BWS-20	BWS-0505	BWS-0510
技术指标					
电源电压	AC220V 50HZ				
消耗功率	600W	1000W	2050W	1200W	1600W
控温范围	RT+5 ~ 99℃				
恒温波动度	± 0.3℃				
跟踪报警	± 2℃				
内胆尺寸 (mm) W×D×H	280×130×150	280×220×150	490×290×150	280×130×150 280×130×150	280×130×150 280×220×150
外形尺寸 (mm) W×D×H	396×250×260	396×330×260	600×390×260	450×395×260	526×395×260
定时范围	0 ~ 5999min				
备注	二孔	双列四孔	双列六孔	二孔 + 二孔	二孔 + 四孔

注：每孔五圈规格尺寸：Φ32、Φ52、Φ72、Φ92、Φ112

多孔盖

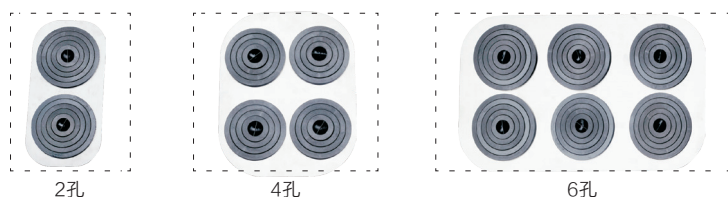

2孔

4孔

6孔

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器..... ¥1500元
- 2、RS485接口和通讯软件..... ¥600元
- 3、嵌入式打印机..... ¥2500元
- 4、尖顶盖..... ¥350元

注：RS485、打印机二选一

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02

生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04

电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06

隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08

CO₂培养箱 09
16

光照培养箱/人工气候箱 17
21

恒温恒湿箱 22
24

回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27

恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30

落地振荡器 31
摇瓶机 32

超低温冰箱 33
洁净工作台 35

生物安全柜 37
离心机 38

干燥箱 39
真空干燥箱 43

加热循环槽 48
恒温振荡水槽 51

油浴锅 54
恒温水槽与水浴锅 55

药品稳定性试验箱 57
步入式药品试验室 63

老化试验箱 64
热空气消毒箱 64

高低温(交变)试验箱 65
高低温(交变)湿热试验箱 66

紫外气候试验箱 67
68

氙灯耐气候试验箱 69
盐雾腐蚀试验箱 70

电阻炉 71
74

旋转蒸发仪 75
循环水真空泵 78

耐腐蚀隔膜泵 79
循环冷却器 80

磁力搅拌器 81
83

顶置电动搅拌器 84
氮吹仪 85

漩涡混匀仪 86
多用途试管振荡器 87

孵育器/金属浴 88
恒温金属浴 89

微孔板迷你离心机 90
均质分散机 91

粘度计 93
96

控制器介绍 97
选购件介绍 98